

無歯顎補綴領域を極める 豊富なバリエーションの402シリーズ

口腔内最大の補綴物、総義歯。その製作時には、口腔粘膜の形を機能的に捉え、適正な咬合高径や人工歯の排列位置などを見つけ出すため様々なテクニックが必要となります。それらの修得の第一歩として、口腔粘膜の特性や種々の印象材の使用法、与える咬合様式などを理解

するため、基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。402シリーズは、ソフト粘膜を付与した様々な印象採得法が行えるモデルから、人工歯排列などの技工作業が行える石こうモデルまで、実習目的に応じて様々なバリエーションの中から選択が可能です。



G10-KGP.6

印象採得用顎模型 [G10-KGP.6]

ソフトタイプ粘膜を装着し、モデリングコンパウンドが使用可能な無歯顎模型。上顎小窩などの形態的特長を付与し、筋形成が可能なよう唇頬移行部から粘膜を立ち上げています。

ソフトタイプ粘膜 シリコン印象材使用不可	粘膜交換不可 シンプルマネキン装着不可	咬合器装着不可 マグネットプレート非装着
-------------------------	------------------------	-------------------------

概形印象 精密印象 筋圧形成 個人トレーの製作 咬合床製作 咬合採得 人工歯排列 義歯の重合 義歯の装着



印象採得 / G10シリーズ

G10シリーズは、ソフトタイプ粘膜を装着しハミュラーノッチや口蓋小窩など印象採得時の目安となる形態的特長を有しています。また、シリコン印象材などが使用できるため、種々の印象材を用いた概形印象や精密印象など、様々な印象採得法が可能です。さらに、KGP.6モデルでは筋圧形成が可能なよう、唇・頬粘膜を想定した立ち上がり付与しており、より臨牀的な実習も可能です。



咬合採得 / G2シリーズ、402Kモデル+NAシリーズ

石こう模型のG2シリーズでは、規格化された模型上での咬合床の製作やゴシックアーチトレーサー装着などの技工実習が可能です。また、オプションのNシリーズ蠟堤と402Kモデルなどを組み合わせれば、マネキン実習での咬合平面の設定や垂直位および水平位などの咬合採得法を実習できます。



人工歯排列 / G2シリーズ、NCシリーズ

石こう模型のG2シリーズや石こう模型と蠟堤がセットされたNCシリーズを用いれば、フルバランスドオクルージョンやリンガライズドオクルージョンなどの咬合様式下で色々な手法を用いた人工歯排列実習を行うことができます。また、その後の重合・研磨・選択削合など一連の技工実習も行うことができます。



G10FE-402K

印象採得用顎模型 [G10FE-402K]

ソフトタイプ粘膜を装着し、各種印象材も使用可能な無歯顎模型。Nシリーズ蠟堤と組み合わせて使用することによりマネキン実習での咬合採得実習も可能です。

バリエーション / 標準価格

• G10D-402K (D咬合器つき)	• G10-402K (咬合器なし)
----------------------	--------------------

ソフトタイプ粘膜 シンプルマネキン装着可	粘膜交換不可 マグネットプレート装着	シリコン印象材使用可
-------------------------	-----------------------	------------

概形印象 精密印象 筋圧形成 個人トレーの製作 咬合床製作 咬合採得 人工歯排列 義歯の重合 義歯の装着



NC-N4

蠟堤付き石こう製無歯顎模型 [NCシリーズ]

402モデルに合うNシリーズ蠟堤と石こう模型G2-402をセットした無歯顎模型。蠟堤のアーチや角度の異なる3種類の中から選択できます。

バリエーション / 標準価格

• NC-N4	• NC-N6
• NC-N7	

構成品

• 蠟堤 NA-各種	• 石こう製無歯顎模型 G2-402
------------	--------------------

石こう製モデル マグネットプレート非装着	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可 [※]
-------------------------	---------	--------------------------

※オプションパーツによる

概形印象 精密印象 筋圧形成 個人トレーの製作 咬合床製作 咬合採得 人工歯排列 義歯の重合 義歯の装着

●交換用パーツ



NA-N4

蠟堤 [NAシリーズ]


402モデルに装着可能な蠟堤。角度とアーチの異なる3種類の中から選択できます。

バリエーション / 標準価格

- NA-N4
- NA-N6
- NA-N7

ワックス顎 (蠟堤) 形態一覧表

	上顎	下顎	アーチ
N4	80°	85°	標準
N6	75°	75°	標準
N7	75°	80°	スクエア

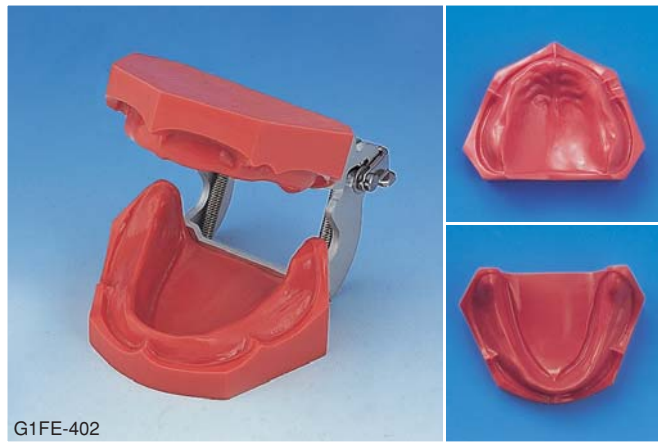

G1FE-402

1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-402]

402Kモデルと形態が同じハードタイプ粘膜の無歯顎模型です。


ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着
----------	--------------	--------------

*オプションパーツによる

■ バリエーション/標準価格

- G1D-402 (D咬合器つき)
- G1-402 (咬合器なし)

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

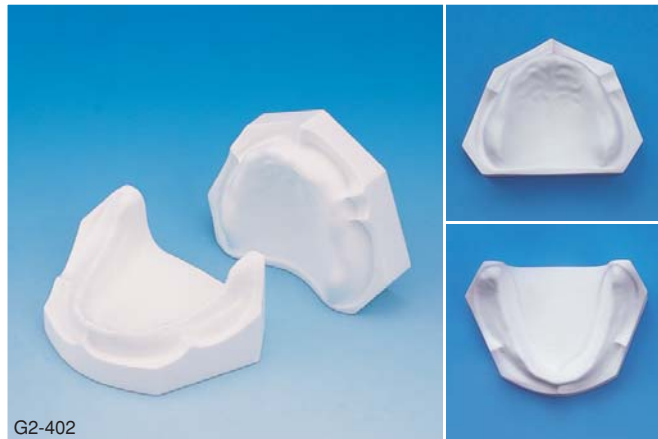

G2-402

石こう製無歯顎模型 [G2-402]

402Kモデルと形態が同じ石こう製無歯顎模型です。個人トレーの製作や人工歯排列実習が可能です。石こうモデルのためFE咬合器などの装着はできません。

石こう製モデル	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可*
マグネットプレート非装着		

*オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



H3-402

石こう模型用陰型(無歯顎) [H3-402]

402Kモデルと同形態の無歯顎石こう模型製作用のゴム枠です。販売は、片顎ずつとなります。

石こうモデル用ゴム枠		
------------	--	--

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Others

その他のモデル



ND-N8

G2-402F

ベースプレート咬合堤つき石こう製無歯顎模型 [ND-N8]

402モデルと形態の異なる石こう模型G2-402Fモデルにベースプレートを付与し、咬合堤をセットした無歯顎模型です。

■ 構成

- ベースプレートつき咬合堤 NB-N8
- 石こう製無歯顎模型 G2-402F

■ 交換用モデル

- 石こう製無歯顎模型 G2-402F
- ベースプレートのみ NE-N8
- ベースプレートつき咬合堤 NB-N8

石こう製モデル	ベースプレートつき咬合堤	咬合器装着不可
シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着	

*オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



G1FE-402F

1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-402F]

ND-N8モデルに付属している402Fモデルと形態が同じハードタイプ粘膜の無歯顎模型です。


■ バリエーション/標準価格

- G1D-402F (D咬合器つき)
- G1-402F (咬合器なし)

ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着
----------	--------------	--------------

*オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

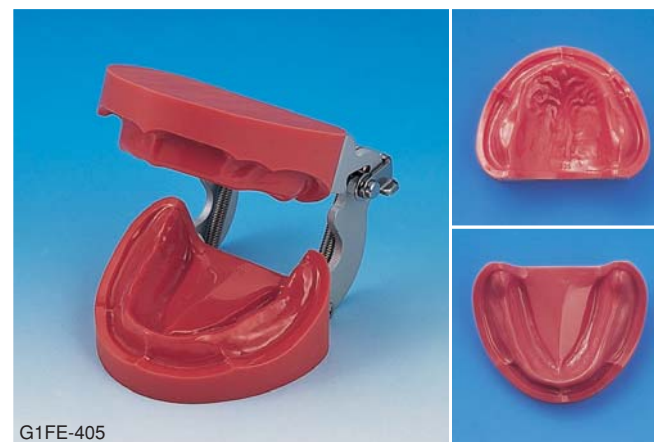

G1FE-405

1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-405]

補綴修復用有歯顎モデル500Aシリーズと合うアーチのレジン製無歯顎模型です。

■ バリエーション/標準価格

- G1D-405 (D咬合器つき)
- G1-405 (咬合器なし)

ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着
----------	--------------	--------------

*オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



G2-405

石こう製無歯顎模型 [G2-405]

405モデルと形態が同じ石こう製の無歯顎模型です。

石こう製モデル	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可*
マグネットプレート非装着		

*オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------