



ボンディング材／保存修復関連材料

光重合型ボンディング材
AQボンド プラス

1液性という簡単操作と健全歯質やう蝕影響象牙質に対しても優れた接着性を発揮する光重合型ボンディング材。4-META含有のサラサラした液材とスポンジに含まれた接着促進成分が歯質に強い浸透性を発揮し、良質な樹脂含浸象牙質を形成。薄いボンディング材層とCRへの優れた接着性能を発揮します。

- ◎用途 歯質とコンポジットレジンとの接着、歯面コーティング
- 標準価格 セット
- セット内容 ボンド5.5mL、キャタスポンジ175粒、キャタブラシ10本、V型ダッペン5個
- 単品 ボンド5.5mL キャタスポンジ175粒
キャタブラシ100本 V型ダッペン30個

管理医療機器 医療機器承認番号:21500BZZ00138000 歯科用象牙質接着材



ボンド
■標準価格 5.5mL



キャタスポンジ
■標準価格 175粒



**AQボンド プラス
表面処理材**

エナメル質に用いる際のエッチング材です。
■標準価格 5mL
管理医療機器 医療機器承認番号:21500BZZ00138000 歯科用象牙質接着材
製造販売元:サンメディカル株式会社



ベースセメント／保存修復関連材料

シアノアクリレート系裏層材
ニッシン ベースライナー

生体親和性に優れたシアノアクリレートを用いたベースセメント。歯質との良好な接着性と歯髄に対しての高い生体親和性により、高い辺縁封鎖性と歯髄保護効果を発揮。また、多湿化においても硬化はシャープに進むため直ちに形態修正しても脱落することもなく、診療効率を向上させています。

- ◎用途 ベース、ライニング用
- 色調 アイボリー
- 標準価格 1-1セット
- セット内容 粉末6.5g、液4.5mL、練和紙、粉計量、スプーン、スタンド
- 単品 粉末6.5g
液4.5mL

管理医療機器 医療機器承認番号:20500BZZ00979000 歯科用シアノアクリレート系セメント



FH.セメント ダッペンシート

使い捨てタイプのダッペンシートです。
◎用途 常温重合型レジンの粉末や液の採取など
■標準価格 1箱(50枚入)



充填用コンポジットレジン／保存修復関連材料

前歯用コンポジットレジン
メタフィル C

歯頸部充填に適した光重合型コンポジットレジン。反応性有機質複合フィラーを配合しているため、べたつかず滑らかに広がる独自の賦形性を有しています。また硬化後の艶だしも容易で、耐衝撃・耐摩耗性に優れた性能も備えています。
※X線造影性は付与しておりません。

- ◎用途 前歯部の窩洞の充填、歯頸部窩洞の充填
- 色調 全10色/A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3、DARK BROWN(ダークブラウン)*1、INCISAL(インサイザル)*2
- ※1 高齢者の歯頸部や根面う蝕の修復用。 ※2 切端部の充填や多層充填用(より自然感が必要な場合他シェードに重ねて充填。)
- 標準価格 セット(4本入)
- セット内容 A2、A3、A3.5、DARK BROWN
- 単品 1本2.5mL(3.5g)

管理医療機器 医療機器許可番号:25B2X00005 歯科充填用コンポジットレジン 製造販売元:サンメディカル株式会社



充填用コンポジットレジン／保存修復関連材料

高流動性フロアブルコンポジットレジン
メタフィル Flo

優れた耐摩耗性、表面滑沢性、低吸水性、X線造影性を有した高流動性タイプの光重合型フロアブルレジン。流動性を高めながらタレにくくすることで浅い窩洞や充填の困難な窩洞にも流れ込みやすく、窩洞の隅々までいきわたる操作性を実現。また、シェードも豊富で審美的な修復の幅が広がります。

- ◎用途 窩洞の充填、ポーセレン・硬質レジンの破折修復、小窩裂溝・シーラント充填用
- 色調 全7色:A1、A2、A3、A3.5、B2、DARK BROWN(ダークブラウン)*1、オベーク*2
- ※1 高齢者の歯頸部や根面う蝕の修復用 ※2 金属色の遮蔽、変色歯の色調遮蔽など
- 標準価格 1.5mL(2.6g)
- 内容 シリンジ1本(1.5mL)、ニードルチップ5本(ゴム栓1個付)
- 別売品 ニードルチップ(50本入)

メタフィル Flo 管理医療機器 医療機器承認番号:21200BZZ00621000 歯科充填用コンポジットレジン 製造販売元:サンメディカル株式会社
メタフィル Flo オベーク 管理医療機器 医療機器承認番号:21400BZZ00016000 歯科充填用コンポジットレジン 製造販売元:サンメディカル株式会社




充填用コンポジットレジン／保存修復関連材料

低流動性フロアブルコンポジットレジン
メタフィル Flo アルファ


メタフィル Floの機能そのままに、やや流れを抑えた光重合型フロアブルレジン。低流動性によりタレにくく思ったところにとどまる性能を高め、賦形性も向上。また、カメレオン効果で歯質とマッチングするため、歯頸部の充填や切縁部への充填に最適です。

- ◎用途 窩洞の充填、ポーセレン・硬質レジンの破折修復、小窩裂溝・シーラント充填用
- 色調 全6色:A1、A2、A3、A3.5、B2、DARK BROWN(ダークブラウン)*
- ※高齢者の歯頸部や根面う蝕の修復用
- 標準価格 1.5mL(2.6g)
- 内容 シリンジ1本(1.5mL)、ニードルチップ5本(ゴム栓1個付)
- 別売品 ニードルチップ(50本入)


管理医療機器 医療機器承認番号:21700BZZ00465000 歯科充填用コンポジットレジン 製造販売元:サンメディカル株式会社

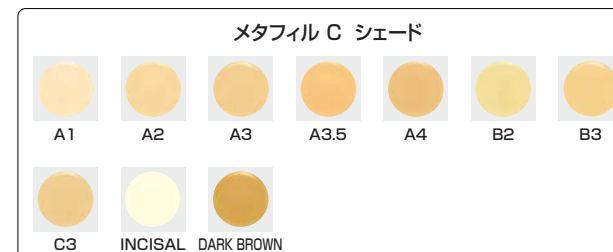

(ご注意: X線造影性は付与しておりません。)

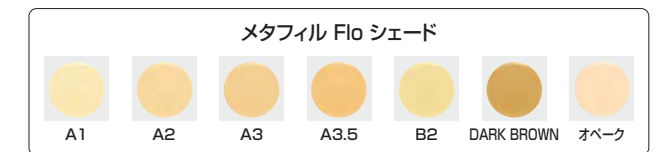

(X線造影性を有しています。)

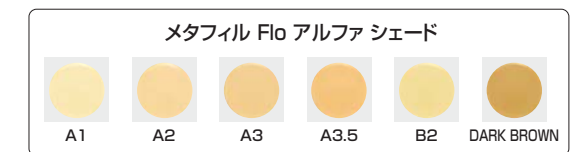

(X線造影性を有しています。)