



矯正用常温重合型レジン／矯正関連用材料

急速硬化即時重合レジン

## ナチュラル オルソドンティックレジン



粉と液とのなじみが良く厚く盛り上げる箇所でもタレにくく、賦形性を向上した矯正用常温重合型レジン。フリカケ法、混和法、筆積み法のいずれの方法にも使用でき、広い面積にも迅速に築盛することができます。また、約6分と短時間で硬化するため作業効率も向上させています。

- ◎用途 矯正用リテーナー、スプリント、乳歯義歯の製作など
- 色調 全2色／クリア、ピンク(液に着色)
- 標準価格 粉末100g 粉末500g(袋入)  
液100mL 液250mL

管理医療機器 承認番号:21700BZZ00272000 歯科矯正用レジン材料



矯正用常温重合型レジン／矯正関連用材料

矯正用即時重合レジン

## オーソクリスタル



硬化後の色の変化が少なく透明性の高い矯正用常温重合型レジン。ワイヤーと石こうの狭い隙間にも流れ込みやすくするため、粉と液の初期流動性を高め操作性を向上。フリカケ法、混和法、筆積み法のいずれの方法にも使用でき、硬化時間も約6分と短く作業効率を向上させています。

- ◎用途 矯正用リテーナー・スプリント・FKOの製作など
- 色調 全2色／クリア、ピンク(液に着色)
- 標準価格 セット
- セット内容 粉末100g、液100mL、スポイト、小分け容器
- 単品 粉末100g 粉末500g(袋入)  
液100mL 液250mL

管理医療機器 承認番号:21700BZZ00271000 歯科矯正用レジン材料 株式会社ロッキー・マウンテンモリタOEM品




その他の矯正材料／矯正関連用材料

レジン用分離材

## ネオセパルギン

石こうに塗布しやすい粘度に調整したレジン分離材。石こう表面に薄く丈夫な分離膜を形成するため、分離後のレジンには光沢のある面が得られます。各種常温重合型レジンはもちろん、義歯床用レジンや石こう同士の分離にも使用できます。

- ◎用途 常温重合型レジンの分離、義歯床用レジンの分離など
- 標準価格 300mL

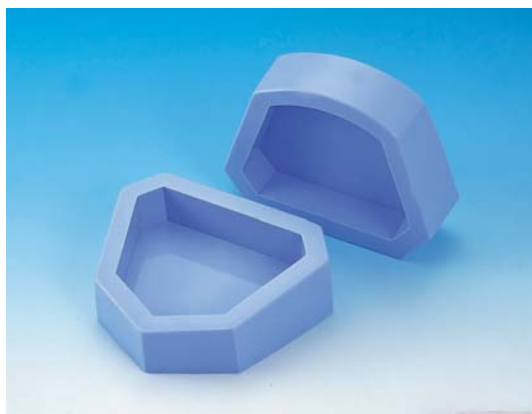

その他の矯正材料／矯正関連用材料

## スタディモデルゴム枠

スタディモデルの土台製作用ゴム枠です。永久歯顎用と乳歯顎用があり、永久歯顎用は外形の異なる角型と丸型の2種類あります。

- ◎用途 スタディモデル土台製作用
- 種類・標準価格 永久歯顎用 角形 H12-A  
丸型 H12-C  
乳歯顎用 角型 H12-B

寸法 (mm)

